


Standard C/: Componentes

Tecido mole



Referência	Produto
	ANKYLOS® Standard C/ Formador de Sulcos compact:
3102 1011	para pilar a / 1.5
3102 1021	para pilar a / 3.0
3102 1026	para pilar a / 4.5
3102 1028	para pilar a / 6.0
3102 1031	para pilar b / 1.5
3102 1041	para pilar b / 3.0

INSTRUMENTOS

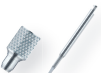


Instalação e Remoção do Formador de Sulcos:

3103 3410	Adaptador para Chave Manual
3103 3455	Chave Sextavada 1.0mm

Pilar Standard C/

Alturas gengivais

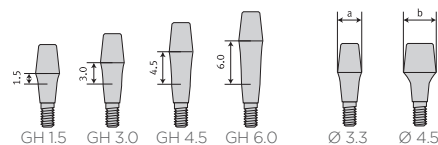

Referência	Produto	Referência	Produto
	ANKYLOS® Pilar Standard C/ reto (peça única)		ANKYLOS® Pilar Standard C/ angulado (duas peças com parafuso passante fixo)
3102 1050	a / 1.5 / 4.0 reto	3102 1130	a / 1.5 / 4.0 15°
3102 1060	a / 1.5 / 6.0 reto	3102 1140	a / 1.5 / 6.0 15°
3102 1070	a / 3.0 / 4.0 reto	3102 1150	a / 3.0 / 4.0 15°
3102 1076	a / 4.5 / 4.0 reto	3102 1160	a / 3.0 / 6.0 15°
3102 1078	a / 6.0 / 4.0 reto		
3102 1080	a / 3.0 / 6.0 reto		

3102 1090	b / 1.5 / 4.0 reto	3102 1170	b / 1.5 / 4.0 15°
3102 1100	b / 1.5 / 6.0 reto	3102 1180	b / 1.5 / 6.0 15°
3102 1110	b / 3.0 / 4.0 reto	3102 1190	b / 3.0 / 4.0 15°
3102 1120	b / 3.0 / 6.0 reto	3102 1200	b / 3.0 / 6.0 15°

INSTRUMENTOS



Instalação de pilares retos (25 Ncm):

3103 3621	para pilar a, curto
3103 3622	para pilar b, curto
3103 3633	para pilar a, longo
3103 3634	para pilar b, longo



Instalação de pilares angulados (15 Ncm):

3103 3625	Chave sex 1.0 mm 15 Ncm
3103 3628	1.0 mm Hex, longo
3103 3485	Chave de posicionamento



Fixação de Coroas e Pontes:

3105 6021	ANKYLOS® Parafuso de Retenção Hexagonal Oclusal M 1.6
3105 6051	ANKYLOS® Parafuso de Retenção Hexagonal Lateral M 1 x 0.2

INSTRUMENTOS

3103 3625	1.0 mm hex, 15 Ncm
3103 3626	1.0 mm hex, curto, 10 Ncm

INSTRUMENTOS

3103 3410	Adaptador para Chave Manual
3103 3450	Lâmina 1.6 mm, 10 Ncm

Impressões




Referência	Produto
	ANKYLOS® Coping de Transferência Standard
3104 5011	a / 1.5 / 4.0 e a / 3.0 / 4.0
3104 5021	a / 1.5 / 6.0 e a / 3.0 / 6.0
3104 5031	b / 1.5 / 4.0 e b / 3.0 / 4.0
3104 5041	b / 1.5 / 6.0 e b / 3.0 / 6.0


Registrado por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 - CEP 25665-010 - Petrópolis-RJ
CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsply.com.br - SAC: 0800 721 1200
Responsável Técnica: Marcelle Cortezia - CRF/RJ nº 7999
Registro ANVISA nº: 80196880226 (Instrumentos Cirúrgicos); 80196880216
(Instrumentos Protéticos); 80196880228 (Abutments Protéticos de Titânio);
80196880227 (Componentes Protéticos de Plástico).

1 Implantes, Brocas e Promotores de Rosca disponíveis também em
diâmetros C (veja o catálogo de produtos ANKYLOS®)


Passo a Passo Standard C/

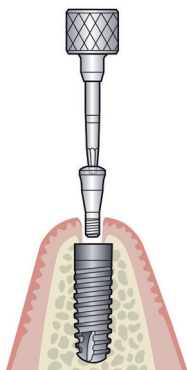


1 | Remover o Formador de Sulco
após a modelação gengival

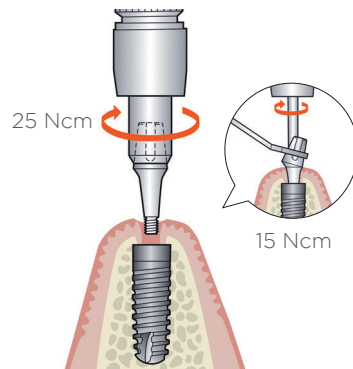


2 | Inserir o Pilar ANKYLOS®
Standard C/ reto ou angulado

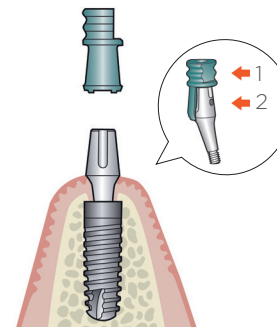


3a | Posicionar o Coping de Transferência ANKYLOS®.
Nos pilares angulados o lado do ombro (1) do transferente deve ser posicionado paralelo à entrada do parafuso.

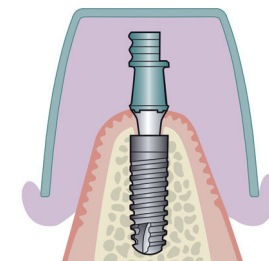


3b | Moldagem do Pilar ANKYLOS® Standard com Coping de Transferência.

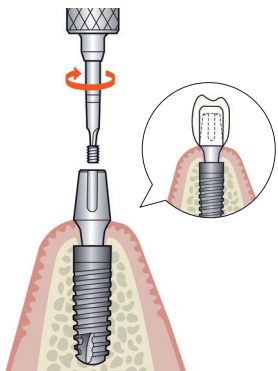


4 | Restauração Provisória.
Selar a abertura com um parafuso sem cabeça (3105 6010)
(Suporte digital 3103 3410 e lâmina de 1.0 mm 3103 3460)

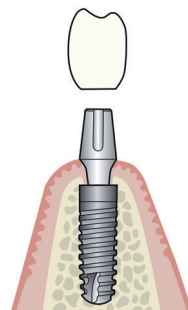

5a | Prótese cimentada.

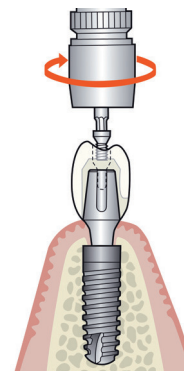

5b | Prótese parafusada por oclusal (pilar reto).
(1.0 mm Hexagonal, 3103 3626, com 10 Ncm)

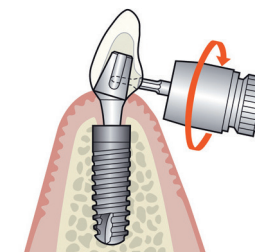

5c | Prótese parafusada lateralmente (pilar angulado).
(1.0 mm Hexagonal, 3103 3626, com 10 Ncm).